



Software Agilent EZChrom Elite
para procesamiento químico y petroquímico

Un sistema de datos

para todos los instrumentos del laboratorio.

Our measure is your success.



Software EZChrom Elite

Unifique su laboratorio bajo un sistema de datos.

No importa si su laboratorio utiliza un único instrumento, varios cientos de distintos fabricantes, el software EZChrom Elite permite unificar su manejo. Con soporte para más de 330 módulos cromatográficos de más de 25 fabricantes, EZChrom Elite le permite operar todos sus instrumentos LC y GC bajo una única interfase muy sencilla.

Simplifique

Cuando tiene que “hacer más con menos”, ¿y quién no se ve en el caso hoy en día?, lo último que necesita es la complejidad añadida de lidiar con una serie de sistemas de datos cromatográficos diferentes.

Sustituya todos esos paquetes de sistemas de datos cromatográficos por EZChrom Elite y reducirá no sólo el número de paquetes de software a soportar sino también el tiempo y los costes de mantenimiento, formación y reparación de errores y confusiones del personal.

Integración en LIMS transparente


EZChrom Elite permite la transferencia de ficheros de datos a y desde un sistema LIMS, eliminando el tiempo y los riesgos implicados en la transferencia manual de los datos. Como sistema de datos cromatográficos estándar en la industria de procesamiento de hidrocarburos, EZChrom Elite es soportado por terceros proveedores de sistemas LIMS e interfases LIMS-CDS.

Adaptable a cualquier laboratorio y flujo de trabajo


EZChrom Elite se puede adaptar fácilmente a las necesidades particulares de su laboratorio, con independencia de dónde esté ubicado éste. Disponible en versiones localizadas a distintos idiomas (inglés, japonés, chino), el software soporta interfases de usuario tanto estándar como personalizadas, permitiéndole configurar a voluntad qué es lo que van a ver y percibir los usuarios en función de su propio flujo de trabajo.

Y hasta una elaboración de informes más sencilla


EZChrom Elite proporciona toda la gama de formatos de informe estándar que cabe esperar de un sistema de datos cromatográficos puntero. También permite generar informes de métodos y secuencias personalizados, con un formato exactamente acorde a sus necesidades, automáticamente desde el sistema de datos. No hay necesidad de transponer los datos desde el informe de salida del instrumento al formato de informe solicitado por el cliente.

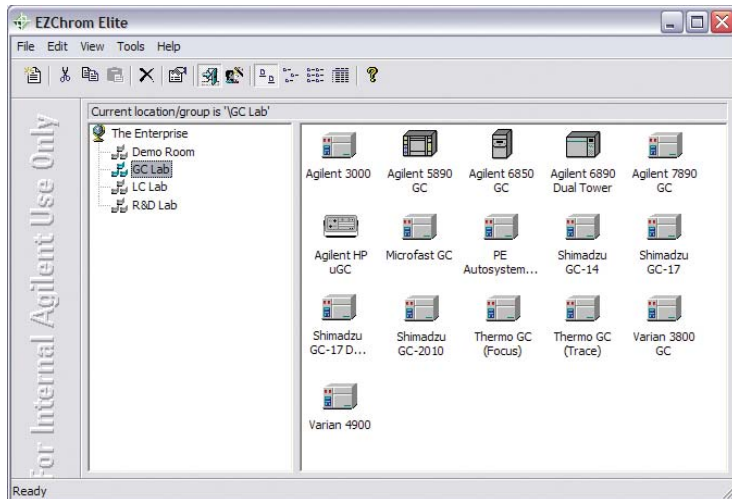

El sistema de datos cromatográficos multiproveedor más exhaustivo actualmente en el mercado. El software EZChrom Elite le permite manejar instrumentos LC y GC de más de 25 proveedores diferentes utilizando un único sistema de datos y una interfase de usuario consistente.

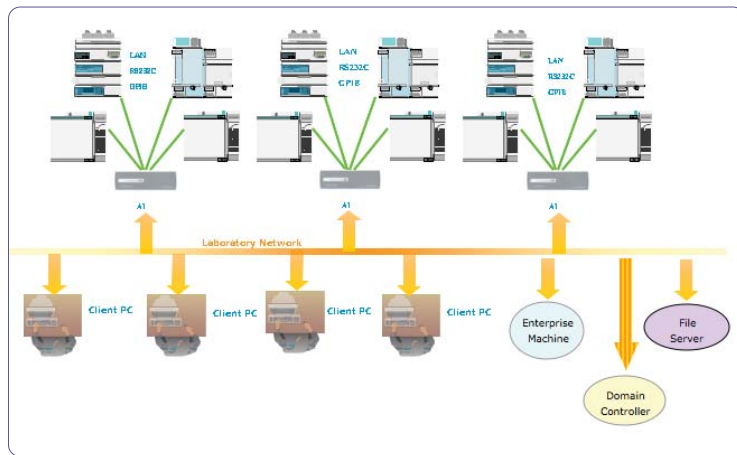

Listo para crecer. EZChrom Elite es ampliable a medida que se amplía su laboratorio: de un sistema de datos cromatográficos para un único instrumento a una estación de trabajo para controlar múltiples instrumentos y a todo un sistema de red cliente-servidor para controlar múltiples instrumentos en distintas ubicaciones.

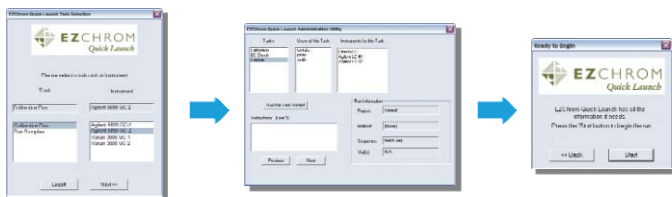

¿Cómo de sencillas le gustaría que fueran las cosas?

El sistema de inicio rápido EZChrom Quick Launch le ofrece una interfase de usuario simplificada: simplemente seleccione una tarea, seleccione un instrumento y en marcha. Para hacer las cosas aún más sencillas, el conjunto de herramientas de automatización EZChrom Elite Automation Toolbox permite convertir la interfase en algo tan sencillo como un único botón "Ejecutar".


#	Test	Result	Action
1	System Suitability	Fail	Abort
2	Calibration	Pass	Reinject
	QC	Fail	Run User Program
	System Suitability		Run Shutdown
	Hardware Status		Alarm
	Conc. Limit		Goto
	Baseline Check		Restart Sys Suit

EZChrom Elite Smart Sequence previene tiempos de inactividad innecesarios.

¿Alguna vez ha lanzado un ensayo de GC largo y se ha encontrado al volver más tarde con que toda la secuencia de muestras se había detenido por causa de un error de calibración, un exceso de ruido en la línea base o algún problema con un patrón? El algoritmo de secuenciación inteligente en función de los resultados de EZChrom Elite evita retrasos innecesarios al dar la opción de realizar de manera automática reinyecciones, ramificaciones en la secuencia, pausas o cancelaciones, emisiones de alarmas o notificaciones a busca-personas o direcciones de correo electrónico cuando se produce un error en la secuencia.

Miembro integrante de la familia de software para laboratorio de Agilent

Al formar parte de la exhaustiva gama de software para laboratorio de Agilent, EZChrom Elite le permite aprovechar todo el potencial de sus instrumentos GC o LC Agilent, incluidas funciones de productividad adicionales de Agilent tales como la congelación de tiempos de retención y la tecnología de flujo capilar.

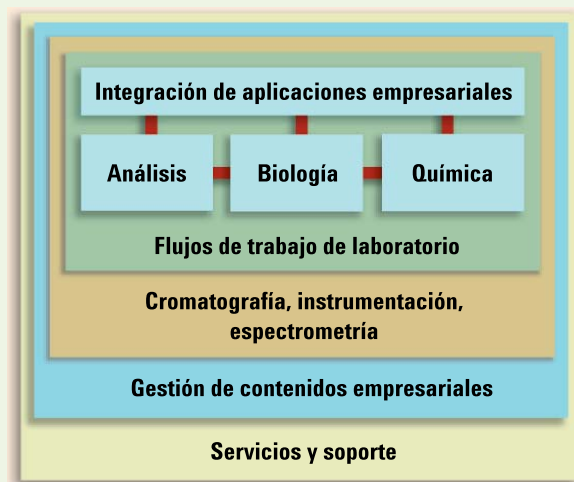

Para más información

Para saber más:

www.agilent.com/chem/ezchrom

Para comprar en línea:

www.agilent.com/chem/store

Para localizar un centro de atención al cliente Agilent en su país:

www.agilent.com/chem/contactus

EE.UU. y Canadá

1-800-227-9770

agilent_inquiries@agilent.com

Europa

info_agilent@agilent.com

Asia-Pacífico

adinquiry_aplsca@agilent.com

Para uso exclusivo en investigación. La información, descripciones y especificaciones contenidas en esta publicación están sujetas a cambios sin previo aviso. Agilent Technologies no se responsabiliza de los errores aquí contenidos ni de daños incidentales o consecuentes en conexión con el suministro, el rendimiento o el uso de este material.

© Agilent Technologies, Inc. 25 de enero de 2009
5990-3512ES



Agilent Technologies